



uMotion

uMotion. Hét loophulpmiddel voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Als een standaard rollator niet veilig genoeg is.


uMotion. Veilig bewegen. Langer zelfstandig.

www.umotion.eu



uMotion. Veilig bewegen. Langer zelfstandig.

Als een standaard rollator niet langer veilig genoeg is, bijvoorbeeld omdat u de ziekte van Parkinson heeft, is de uMotion hét alternatief. U kunt er niet alleen veilig mee lopen, maar ook veilig al uw therapeutische oefeningen mee doen. Gewoon in uw eigen, vertrouwde omgeving.

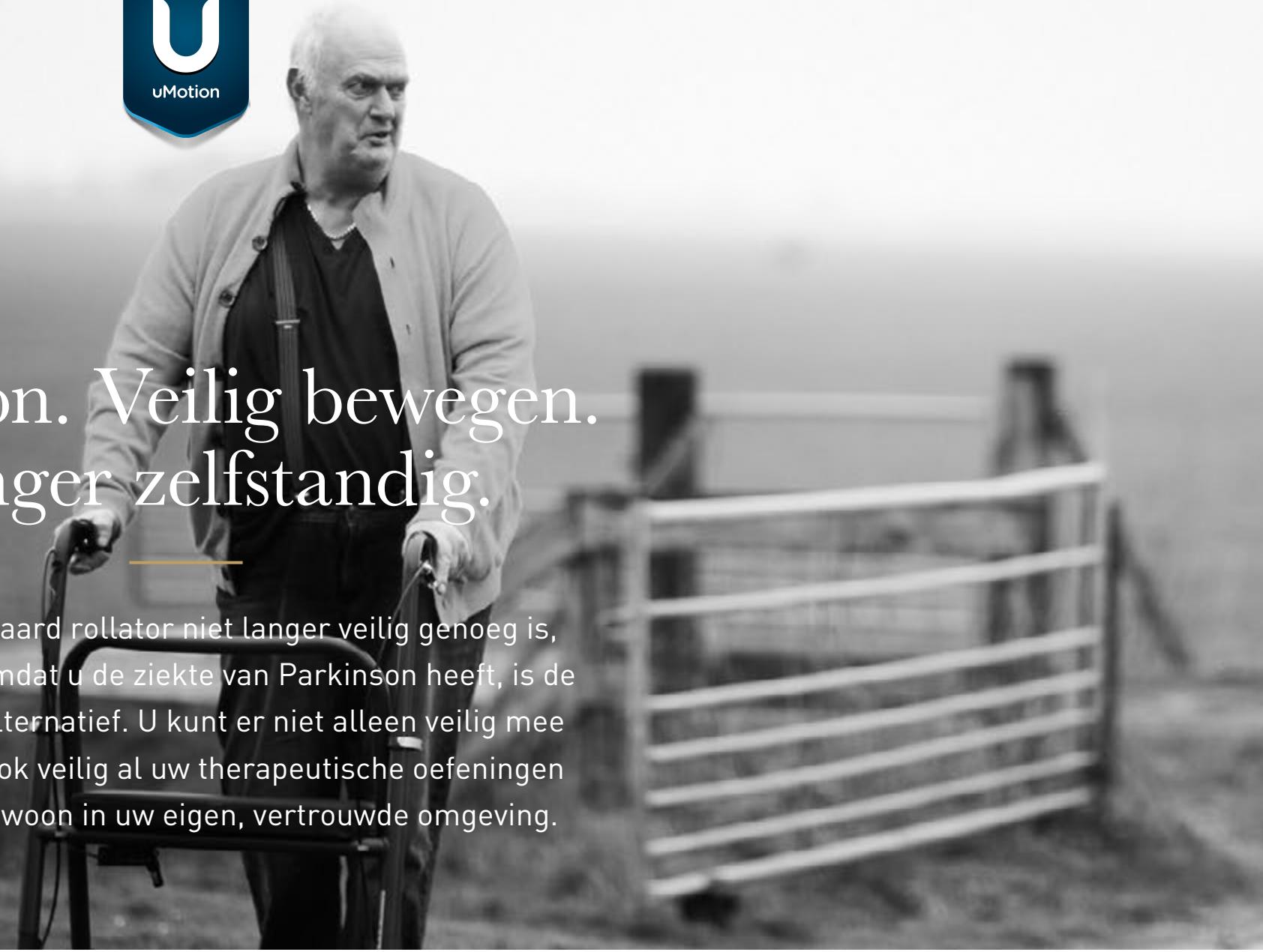

De uMotion is een uniek loophulpmiddel én oefentherapeutisch middel in één. Het is speciaal ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson. De uMotion is veel stabieler - en dus veel veiliger - dan een gewone rollator dankzij de u-vorm van het frame waar de gebruiker als het ware 'in' staat.

De uMotion is ontwikkeld in nauwe samenwerking met patiënten, partners, familieleden en zorgprofessionals. Daardoor beschikt de uMotion over alle specifieke functionaliteiten die een Parkinson patiënt helpen veilig te bewegen en langer zelfstandig te blijven:

- Een omgekeerd remssysteem, dat vallen voorkomt.
- Een sleeprem voor extra controle.
- Groen laserlicht om freezing, een zo kenmerkend verschijnsel bij Parkinson, op te heffen.
- Een royale zitting met antislip en rugsteun, zodat u veilig kunt zitten en opstaan of tijdens het wandelen kunt uitrusten.
- Optimale wendbaarheid dankzij een kleine draaicirkel; bijzonder prettig in kleine ruimtes.
- Ingebouwde drempelhulp om veilig over drempels te rollen.
- Compact en gemakkelijk in en uit te klappen en te vervoeren.

Samen met de uMotion eenvoudig en veilig thuis uw oefeningen doen

Als u de ziekte van Parkinson heeft, is bewegen het beste medicijn om u zo lang mogelijk goed te voelen. Een fysiotherapeut of ergotherapeut helpt u daarbij. Maar naar diens praktijk gaan kan voor u een enorme opgave zijn.

Met de uMotion kunt u uw oefeningen gewoon thuis doen, in uw eigen vertrouwde omgeving. U hoeft er de deur niet voor uit. De unieke stabiliteit van de uMotion maakt elke oefening veilig en effectief. U heeft als het ware uw therapeut in huis.




uMotion: unieke stabiliteit

De uMotion heeft een u-vormig frame, dat voor unieke stabiliteit zorgt. Uw voeten staan tussen het frame in. Dat stimuleert een correcte lichaamshouding en zorgt ervoor dat u veilig kunt lopen én oefeningen doen.

Op umotion.eu vindt u korte filmpjes met oefeningen die u zelf kunt doen. Uiteraard mét ondersteuning van de uMotion.

Stabiel u-vormig frame

Omdat uw voeten tussen het frame staan, neemt u automatisch de juiste lichaamshouding aan.

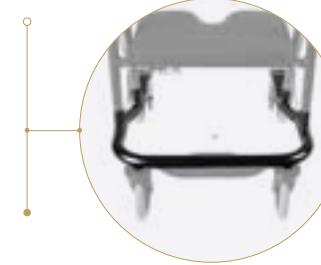

Omgekeerd remssysteem


Omdat de uMotion altijd op de rem staat, kunt u niet vallen. De uMotion rolt alleen als u één of beide handremmen inkijpt.

Zodra u de remmen loslaat, staat de uMotion stil. Dit zorgt er ook voor dat u veilig kunt gaan zitten en opstaan, zonder dat de uMotion wegrolt.



Groene laserstraal


Freezing is een bekend verschijnsel bij Parkinson. De uMotion is voorzien van een groene laserstraal tussen de achterwielen. Door over de groene 'streep' te stappen wordt freezing opgeheven. Groen laserlicht is tot zes keer beter zichtbaar dan rood laserlicht.

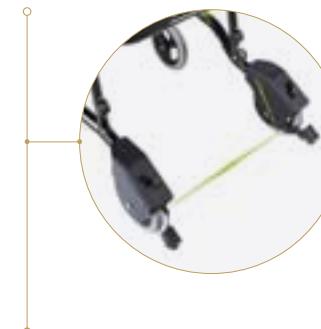

In hoogte verstelbaar

De uMotion is gemakkelijk in hoogte verstelbaar en kan daardoor precies op uw lichaamslengte worden afgestemd.

De uMotion is daarmee geschikt voor iedereen tussen 1.50 en 1.80 meter lang.

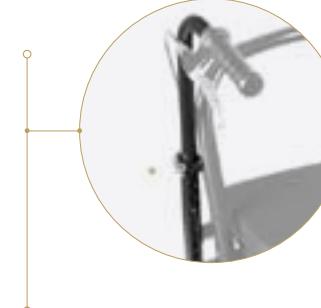

Compact en gemakkelijk

U kunt de uMotion heel gemakkelijk in- en uitklappen. Ingeklapt is de uMotion zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en verticaal weg te zetten.



Optimale wendbaarheid

Dankzij de kleine draaicirkel (<85cm) is de uMotion bijzonder wendbaar. Daardoor kunt u zich ook in kleine ruimtes, zoals wc, badkamer en keuken, gemakkelijk bewegen.

Kleuren

De uMotion is verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, bordeauxrood, mosgroen, warm oranje en blauw. Als u wilt kunt u voor het bovenframe een andere kleur kiezen dan voor het u-frame.



Comfortabele zitting met antislip

De uMotion heeft een royale, comfortabele zitting met antislip en een rugsteun. Handig voor onderweg, als u moe bent en even wilt uitrusten. U kunt de zitting eventueel ook als dienblad gebruiken.



Sleeprem

Voor extra controle over de uMotion kunt u met de sleeprem de gewenste weerstand instellen. De sleeprem kan ook asymmetrisch worden ingesteld.



Ingebouwde drempelhulp

De drempelhulp heeft drie standen voor verschillende drempelhoogtes. De kleine wieltjes zorgen ervoor dat u moeiteloos over de drempel rolt. De wieltjes hebben ook een anti-kantelfunctie.



Stootbumper

Vlak boven de voorwielen bevinden zich twee stoot bumpers. Deze zorgen voor een stukje extra veiligheid, vooral in krappe ruimtes.



Extra

Indien gewenst kunt u uw uMotion bestellen met boodschappenmandje.



“ Ik doe ook mijn dagelijkse oefeningen ”
met de uMotion.

Meneer Oosterdijk



uMotion specificaties



Maximaal lichaamsgewicht uMotion gebruiker	125 kg
Draaicirkel	85 cm
Verstelbaar voor gebruikers met een lichaamslengte tussen	150 - 180 cm
Breedte van de zitting	46 cm
Hoogte van de zitting	54 cm
Wielgrootte	20 cm
Totaalgewicht uMotion	9,5 kg
Materiaal van het frame	aluminium
Afmetingen ingeklap	95x63x46cm (hxbxd)



Meer informatie of de uMotion bestellen,
voor uzelf, uw partner, familielid of cliënt?

Kijk op www.umotion.eu

De uMotion is ontwikkeld en geproduceerd door:

Villerius Medical

Mijnbouwweg 9
3812 RT Amersfoort
020 - 673 7558

info@umotion.eu
www.umotion.eu
www.villeriusmedical.eu



Gepatenteerd: Naam en model zijn beschermd.